




# HeartMate Touch™ Next Generation


HeartMate Touch™ Next Generation はこれまでと同じアプリケーションに新しいデザインを備えています。

このシステムは直感的で柔軟性と高いセキュリティを備え、臨床的に有用なリアルタイム情報へのアクセスを可能にすることで、HeartMate LVAD患者の管理をより効果的にサポートします。

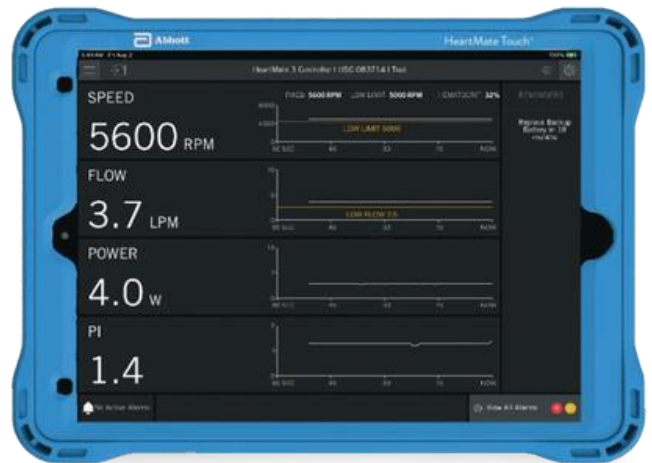

HeartMate Touch™ モニタ

## FEATURES

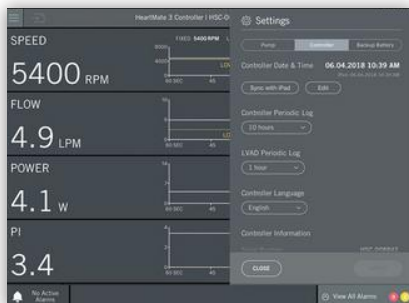

**合理化されたディスプレイ:**  
3つの使いやすい表示ビューがあり、意志決定に必要な最も重要な臨床情報を提供します



**リアルタイムのトレンドとレポート:**  
遅延なくリアルタイムでパフォーマンス情報とレポートを提供します



**アラームカウンターとチェックリスト:**  
重要な患者管理要因を特定し、植込みタスクをより簡単に追跡できるように支援します

HeartMate Touch™



| HeartMate Touch™ モニタ                |         |                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能                                  | モニタ表示   | <ul style="list-style-type: none"><li>ポンプ速度、流量（lpm）、出力、拍動指数（PI）を表示します</li><li>優先度の高い警告アラームと注意アラームを表示します</li></ul>   | ソフトウェアの更新                    | Wi-Fi は常にオフにしておく必要があります。インストールする必要があるiOS ソフトウェアまたは HeartMate Touch™ アプリケーションのアップデートがある場合にはご案内します。Wi-Fi は案内があった場合にのみオンにしてください。誤ってWi-Fiをオンにした場合、HeartMate Touch™ アプリケーションと互換性のないiOSバージョンの更新が誤って発生し、HeartMate Touch™ モニタが動作しなくなる可能性があります。そのような場合は、施設担当者にご連絡ください。 |
|                                     | クリニカル表示 | <ul style="list-style-type: none"><li>ポンプ速度、流量（lpm）、出力、拍動指数（PI）を表示し</li><li>主要なパラメータを表示し、手術中に必要な情報を提供します。</li></ul> |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     | 履歴表示    | <ul style="list-style-type: none"><li>ポンプ速度、流量（lpm）、出力、拍動指数（PI）を表示します</li><li>患者のLVASの履歴を表示します</li></ul>            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ケース込みの寸法                            |         | 27.41 cm × 19.79 cm × 1.96 cm                                                                                       | Wi-Fi とBluetooth®ワイヤレステクノロジー | PCC ID: TFB-1005 (HeartMate Touch™ ワイヤレスアダプター)<br>PCC ID: BCGA2602 (HeartMate Touch™ モニタ)                                                                                                                                                                     |
| 重さ                                  |         | 0.875kg                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 解像度                                 |         | 2224 × 1668ピクセル、264ppi                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 電源要件                                |         | 5.0V DC 2.0 - 2.4A                                                                                                  | 機器のクリーニング                    | HeartMate Touch™ モニタの画面には、指紋、汚れ、傷を防ぐためのコーティングが施されています。このコーティングの効果を保つためには、少量のイソプロピルアルコールで濡らせた柔らかい布、またはアルコールベースの使い捨て布巾で画面を拭いてください。研磨剤入りの布、タオル、ペーパータオル、同様の研磨剤入りの物品、窓用洗剤、家庭用洗剤、溶剤、漂白剤、アンモニア、硝酸を含むクリーナー、過酸化水素、水酸化ナトリウム、研磨剤、圧縮空気、エアゾールスプレー、またはその他の溶剤は使用しないでください。    |
| バッテリー仕様                             |         | リチウムイオン充電電池                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 想定バッテリー寿命                           |         | 3年間                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 定期メンテナンス                            |         | HeartMate Touch™ には、定期メンテナンスは必要ありません                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 日付と時刻の設定                            |         | 日付と時刻はアプリの設定からのみ設定するようにしてください。未検証のiOS ソフトウェアの読み込みが開始する可能性があるため、Wi-Fiをオンにして時計を同期させないでください。                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HeartMate Touch™ ワイヤレスアダプタ(HMT2100) |         |                                                                                                                     | USBケーブル(HMT2166)             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 機能                                  |         | HeartMate Touch™ アプリのタブレットとパワーモジュールをBluetooth®でペアリングする                                                              |                              | タブレットへの電源供給または充電には、Abbott 純正の2メートルのLightning ケーブルのみを使用してください                                                                                                                                                                                                  |
| 寸法                                  |         | 長さ 7.6 cm<br>幅 5.1 cm<br>高さ 5.1cm                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 重さ                                  |         | 45.4 g                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 製品寿命                                |         | 少なくとも3年                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |

HeartMate Touchモニタは、医療従事者が患者のHeartMate II ™またはHeartMate 3™をワイヤレスでモニタリングするために使用されます。HeartMate Touchモニタは、植込み手順中およびシステム動作のモニタが必要な場合に必要です。医療従事者は、ポンプ速度などのシステムパラメータをプログラムし、アラーム状態を評価および追跡し、パフォーマンスデータを表示および保存することができます。

販売名 植込み型補助人工心臓HeartMate II 承認番号 22400BZIO0017000  
販売名 植込み型補助人工心臓HeartMate3 承認番号 23100BZIO0006000  
選任製造販売業者 アボットメディカルジャパン合同会社 〒105-7115 東京都港区東新橋 一丁目5番2号汐留シティセンター  
外国特例承認取得者 ソラテックコーポレーション [Thoratec Corporation]

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.  
\* Indicates a third party trademark, which is property of its respective owner.  
© 2025 Abbott. All Rights Reserved. MAT-2313328 v3.0 | Item approved for Japan use only.

