


お馴染みのデザインが進化を遂げる


アボットはペーシング技術の革新を追求し続け、新しいペーシングリードを開発しました。UltiPaceをご紹介します。

遠位部におけるリード損傷への耐性


UltiPaceの先端には柔らかいシャフト部分がなく、チップ電極からリング電極まで硬さを保つように設計されています。導体にかかる負荷と遠位部におけるリード損傷の可能性を軽減します¹。

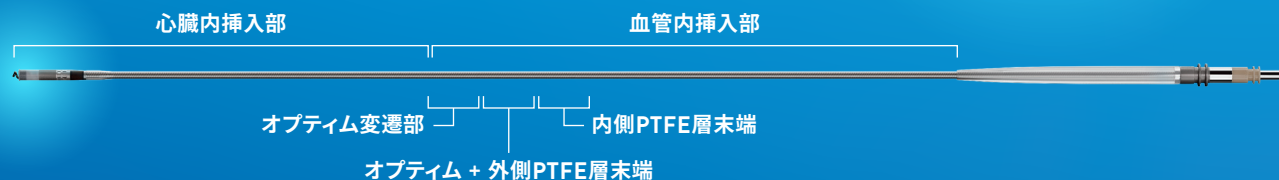

遠位部断面
Tendril™ STS と同一

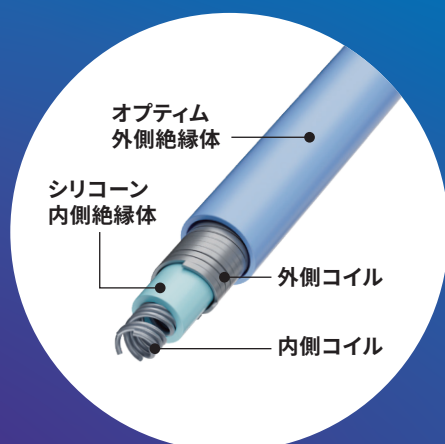

近位部断面
Tendril STS とは異なる絶縁層

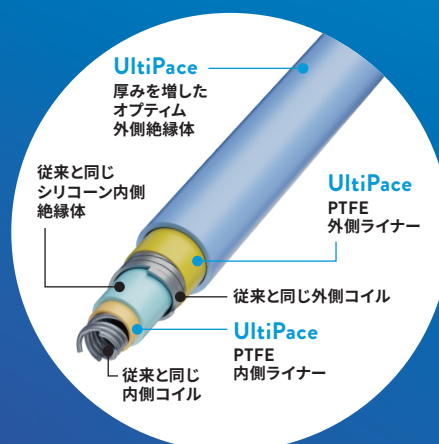

UltiPaceの遠位部は前身であるTendril STSでお馴染みのデザインを引き継いでいます。近位部は絶縁体を追加し摩耗とリード損傷に対する耐性を強化していますが6Frのシースイントロドューサー径は変わりません²。

UltiPace™ VS.
TENDRIL™ STS³

3X 摩耗に対する
耐性を強化

3.5X リード損傷に
対する耐性を
強化

※上記はUltiPaceを当社旧製品Tendril STSと
比較した社内データをお示しています。

VS. TENDRIL MRI™³

2.2X 摩耗に対する
耐性を強化

2.6X リード損傷に
対する耐性を
強化

※上記はUltiPaceを当社旧製品Tendril MRIと
比較した社内データをお示しています。

製品の詳細は
アボットの担当営業ま
でお問い合わせください

1. Abbott. Data on File, Engineering Chemical Report. Item: 90994484 Ver D.
2. UltiPace Pacing Leads Model LPA1231 IFU ARTEN600325264 A
3. Abbott. Data on File. Item: 91010074

References

製造販売元

アボットメディカルジャパン合同会社

〒105-7115 東京都港区東新橋一丁目5番2号

汐留シティセンター

TEL 03-6255-6378 FAX 03-6255-6379

販売名：アルティペース	承認番号：30500BZX00279000
販売名：テンドリルMRI	承認番号：22500BZX00240000
販売名：テンドリル STS	承認番号：22200BZX00085000
販売名：ロケーター 3D	承認番号：30500BZX00183000
販売名：アジリス HisPro	承認番号：30300BZX00309000
販売名：コネクタピン変換アダプタ	承認番号：23100BZX00090000

注 意：本品のご使用に際しては、添付文書および取扱説明書等を
必ずお読みください。

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.

©2025 Abbott. All rights reserved.

MAT-2501423 v2.0 | Item approved for Japan use only.

CPS LOCATOR™ 3D CATHETERS

ロケーター3Dは立体的な遠位カーブを
備えたデリバリーカテーテルです。
様々な解剖学的構造に備えて3種類の形
状をご用意しています。



Helix Locking Tool

ヘリックスロッキングツールはヘリッ
クスの伸長と格納を制御することによ
り、リードの固定をサポートする役割
を担います。¹



Agilis HisPro™ Slitter

スリッターはスパイラル状のスタビラ
イゼーションチャンネルによりスリッ
ティング時に安定感をもたらすよう設
計されています。

